

Guldmann™

SR 801

DK	Digitalvægt	2
GB	Digital Scale	7
D	Digitalwaage	12
S	Digitalvåg	17
U.S.A. and countries outside the EU		22



Varenummer:

11340

1.00	Formål og anvendelse	3
1.01	Producent	3
1.02	Beskrivelse	3
1.03	Vigtigt/Advarsler	3
<hr/>		
2.00	Beskrivelse af funktioner	3
2.01	Labels	3
2.02	Betjening	4
2.03	Yderligere information	5
<hr/>		
3.00	Transport	5
<hr/>		
4.00	Vedligeholdelse og opbevaring	5
4.01	Rengøring	5
4.02	Opbevaring	5
<hr/>		
5.00	Batteri	5
<hr/>		
6.00	Tekniske specifikationer	5
<hr/>		
7.00	CE Overensstemmelseserklæring	6

1.00 Formål og anvendelse

1.01 Producent
V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK - 8200 Århus N
Tel. + 45 8741 3151
Fax. + 45 8741 3131

1.02 Beskrivelse
SR 801 digitalvægt er kompakt, præcis og designet til brug i forbindelse med mobile- og loftmonterede personløftere.
SR 801 er fuldstændig selvjusterende og indeholder den sidste nye teknologi inden for mikroprocessorer til måleinstrumenter og opfylder betingelserne for nøjagtige og gentagne vægt målinger med en kalibreret nøjagtighed på 0,1%. Automatisk nulstilling sker elektronisk ved tryk på én knap, hvilket gør det let og hurtigt for hjælperen at veje brugeren.

- 1.03 Vigtigt/Advarsler**
- Læs hele brugsanvisningen før SR 801 tages i brug.
 - Løftekapaciteten på max. 270 kg/600 lbs må ikke overskrides.
 - Brug ikke SR 801 hvor der er risiko for påsprøjtning af vand.
 - Displayet er ikke slagfast og vægten tåler ikke at falde på gulvet.
-


2.00 Beskrivelse af funktioner

2.01 Labels på SR 801



Bemærk


Omstilling mellem vægtangivelse i kg og lbs. sker ved at fjerne den sorte prop som vist på tegningen og ved hjælp af en skruetrækker ændre positionen af den lille sorte kontakt, som derved bliver synlig.

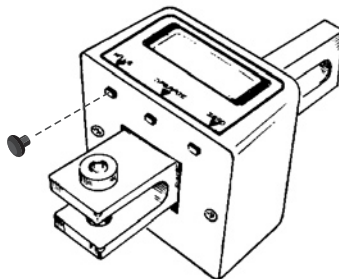

1. Monter SR 801's krog på personløfterens løftbom eller løftestrop. Kontroller at krogeren er placeret sikkert/korrekt og at sikkerhedsskruen er spændt.


Vigtigt

Spænd sikkerhedsskruen (se pil) til den er helt spændt/sikret.

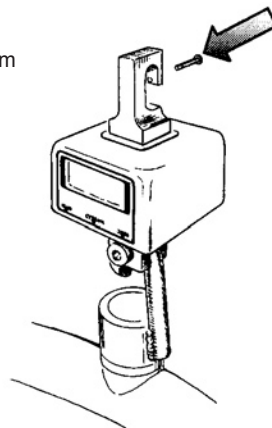

2. Monter bøjljen på koblingsbeslaget under SR 801 og hæng det ønskede løftesejl på løftebøjlen.

3. Når løftesejlet er hængt på løftebøjlen tryk på knappen "Zero" for at nulstille vægten. Karakteren "0" vil nu løbe/panorere hen over displayet i nogle få sekunder hvorefter displayet viser 0,0.
4. Fjern løftesejlet fra bøjljen. Læg løftesejlet på brugeren og hæng det på løftebøjlen igen.
5. Løft forsigtigt brugeren. Når sejlet med brugeren er i ro og frit svævende, trykkes på knappen "Operate" og den aktuelle vægt vises på displayet.

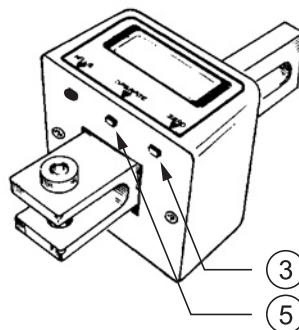**Vigtigt**

Nulstil altid vægten før vejning finder sted.

Bemærk:

Strømsparefunktionen vil automatisk slukke displayet efter 60 sekunder. Skulle displayet slukke før vægt informationen er læst, tryk på knappen "Operate" en gang til.

6. Sænk forsigtigt brugeren efter at vægten er aflæst.

Advarsel

Denne vægt er fremstillet til at veje brugeren i forbindelse med, at han/hun flyttes, f.eks. mellem seng og stol. Vægten er ikke fremstillet til brug i forbindelse med transport af brugeren. I tilfælde af transport skal vægten demonteres.

2.03 Yderligere information

Skulle der være opstået spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med brugen af vægten kontakt venligst distributøren.

3.00 Transport

Guldmann anbefaler at SR 801 transporteres i original emballagen.

4.00 Vedligeholdelse og opbevaring

4.01 Rengøring

SR 801 rengøres med en fugtig klud påført almindelige rengøringsmidler. Der må ikke anvendes kemikalier eller autoklavering for at rengøre SR 801.

4.02 Opbevaring

SR 801 skal opbevares tørt.

5.00 Batteri

SR 801 bruger et 9 volts batteri som strømforsyning. Batteriet skal udskiftes efter ca. 3000 vejninger. Når det er tid for udskiftning, vises et "B" på displayet. Følgende fremgangsmåde kan benyttes:
Fjern de 2 skruer i vægtens kabinet, afmonter låget og udskift batteriet.

Vigtigt

Vægten indeholder ingen komponenter som bruger/hjælper kan servicere. Vægten skal serviceres af faguddannet montør eller af leverandøren. Hvis vægten er forsøgt adskilt bortfalder garantien.

6.00 Tekniske specifikationer

Måleinterval 0 - 270 kg
Display type LCD
Display visning 0,1 kg
Display Interval/nøjagtighed +/- 0,1%
Størrelse (H x B x D) 77x103x77 mm
Egenvægt 0,450 kg
Batteri 9 Volt alkaline
Batteri, levetid Ca. 3000 vejninger

Guldmann™

CE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Producent V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Århus N
EAN landekode: 57
EAN markedsførernummer: 07287
Tlf. +45 8741 3151
Fax +45 8741 3131

Repræsentant Firmanavn

Adresse

Land

Tlf.

Erklærer hermed, at Produkt **SR 801 Digitalvægt**

Type-nr. **XXXXX-YYYY-ZZZZ^{x)}**

^{x)} XXXXX: Produktets salgsnr., YYYY: Produktlebensr. i produktionsår, ZZZZ: Produktionsår

er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i:

- EN 50082-1: Electromagnetic compatibility
- EN 55022: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

i henhold til Rådets Direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 og 90/384/EØF af 20. juni 1990

Skejby, 06.01.2003

Udstedelsessted og -dato

Produktansvarlig



Teknisk chef

Guldmann™



Time to care

Guldmann GmbH

Söhnleinstr. 8
D-65201 Wiesbaden
Tel. +49 611 974 530
Fax +49 611 300 018
E-mail info@guldmann.de
www.guldmann.de

Guldmann Sverige AB

Smålandsgatan 4
S-441 57 Alingsås
Tel. +46 0322 55290
Fax +46 0322 55320
E-mail info@guldmann.se
www.guldmann.se

V. Guldmann A/S

Head Office:
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Arhus N
Tel. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
E-mail info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Inc.

5505 Johns Road
Suite 700
Tampa, FL 33634
Tel. 800 664 8834
Tel. 813 880 0619
Fax 813 880 9558
E-mail info@guldmann.net